

+
**WE
KNOW
ENDO.**



MAILLEFER

Gutta-Smart™ + Conform Fit™ Gutta-Percha

Zcela bezdrátový obturační systém

Komplexní řešení pro vaši obturaci

 **Dentsply
Sirona**



Optimalizujte své plnění pomocí komplexního nízkoteplotního řešení

Vyplňte kanálky pohodlně a spolehlivě za použití bezdrátové obturační jednotky Gutta-Smart™ a gutaperčových čepů Conform Fit™. Jsou navrženy pro vzájemnou spolupráci, vykazují stejné tokové vlastnosti při nízké teplotě a rentgen-kontrastnost pro komplexní vertikální plnění za tepla.



Efektivita komplexního řešení. Spolu s vylepšeným dosedem čepů Conform Fit™ poskytuje Gutta-Smart™ účinnost, kterou očekáváte od komplexního systému plnění.




Bezpečnost pacienta. S vědomím, že unikátní složení materiálu neobsahuje přírodní latex, máte pocit jistoty.



Gutaperča s nízkou tokovou teplotou. Složení gutaperči čepů Conform Fit™ i kartuší Gutta-Smart™ umožňuje tok při nízké teplotě vyžadující menší ohřev násadce.



Přesné dosazení, které ucítíte. Čepy Conform Fit™ poskytují pohodlné apikální dosazení pro přesné váznutí, zatímco bezdrátové násadce Gutta-Smart™ poskytují přesnou kontrolu a výbornou hmatovou zpětnou vazbu.

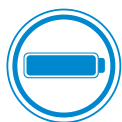

Celodenní výdrž baterie*. Na jedno nabití lze provést celodenní práci.



Pohodlný bezdrátový výkon. Odolný bezdrátový výkon. Dobře vyvážené, lehké a pohodlné při použití. Oba násadce jsou bezdrátové pro zajištění volnosti pohybu.

* Kapacita baterií násadců Pack a Flow umožňuje jejich použití až při pěti ošetřeních denně na jedno nabití.



Efektivita komplexního řešení

V Dentsply Sirona se zabýváme vývojem řešení, která Vám pomohou provádět lepší a bezpečnější endodoncii. Komplexní řešení zahrnující přístroj Gutta-Smart™ a gutaperču Conform Fit™ umožňuje pohodlné a spolehlivé plnění kořenových kanálků.



1. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus®, data na vyžádání. 2. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus® Dual, data na vyžádání.

* Kapacita baterií násadců Pack a Flow umožňuje jejich použití až při pěti ošetřeních denně na jedno nabití.



Bezpečnost pacienta

Na rozdíl od tradiční gutaperči neobsahuje naše patentované složení přírodní latex. Lze ji také používat při nižší teplotě, což snižuje nebezpečí poškození periodontálních vazů související s vyššími teplotami.




Gutaperča tekutá při nízké teplotě

Složení gutaperči nabízí vylepšené tepelné vlastnosti, které umožňují tok za nižší teploty - a dovolují přenos tepla až 4 mm. Unikátní složení také nabízí optimální rentgen kontrastnost a snadné opětovné ošetření.


Vylepšené tepelné vlastnosti

Teplu se přenáší až 4 mm od tepelného zdroje.

Časoběrné termální snímky zachycují přenos tepla v gutaperče.³

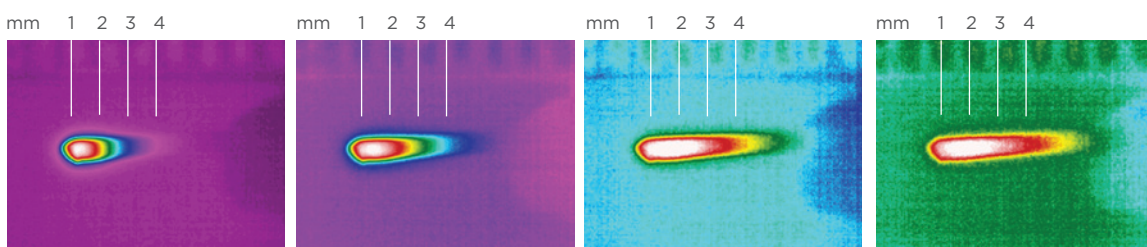

Konzistentní výplň bez přechodových linií na RTG snímku

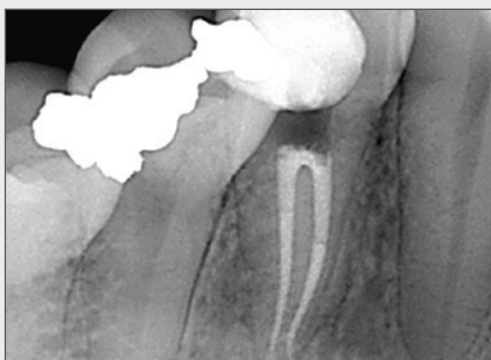

Použití gutaperči s různým složením u jednoho zubu může způsobit různou úroveň opacit.

Snímek zveřejněn se svolením Dr. Phillipa Bella, Mooresville, NC



Gutta-Smart™ a čepy Conform Fit™ obsahují stejnou vylepšenou gutaperču pro konzistentnost na RTG snímku.

Snímek zveřejněn se svolením Dr. Nathaniela Behrentse, Fayetteville, AR

³. Zdroj: Interní testování, data na vyžádání.



Přesné dosazení, které ucítíte

Přesně odpovídající čepy Conform Fit™ poskytují prvotřídní apikální dosazení a přesné váznutí. Při společném použití v rámci komplexního řešení poskytují kartuše Gutta-Smart™ konzistentní hmatovou zpětnou vazbu se snazším přístupem a viditelností do kanálku.⁴

Lepší přenos tepla a tok při nižší teplotě



Variabilní konicita pro přesný dosed a váznutí

Neobsahuje přírodní latex pro větší bezpečnost pacienta

Moderní výrobní technika pro konzistentní tvar a kvalitu

Součást systémového řešení nabízejícího jednoduchost

Pohodlná hlavička pro snadnou identifikaci a manipulaci

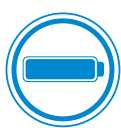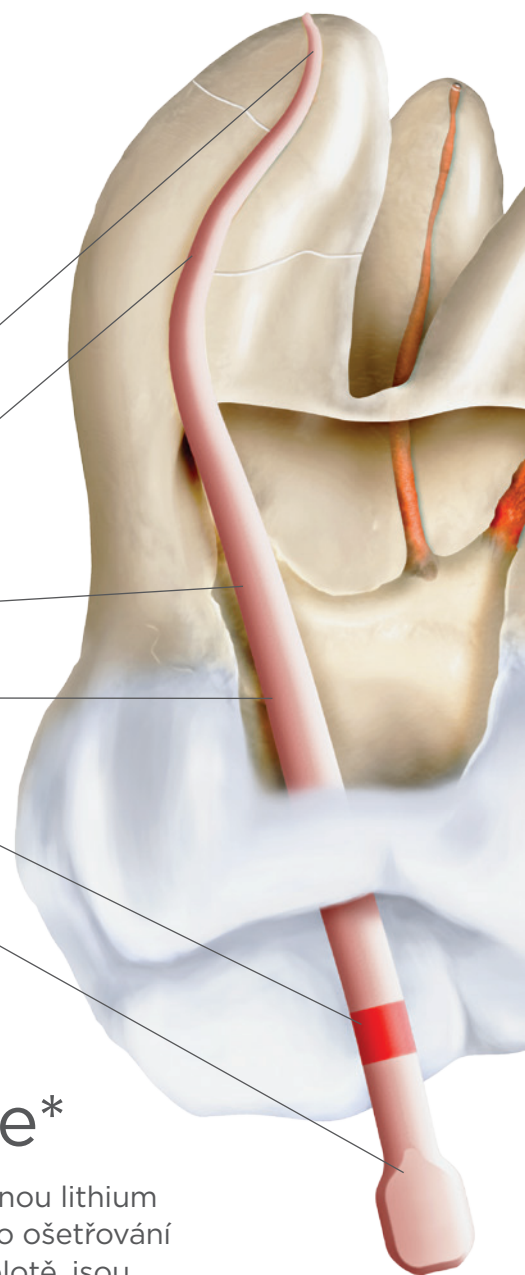

Celodenní výdrž baterie*

Ergonomické násadce Gutta-Smart™ jsou opatřeny účinnou lithium fosfátovou baterií, která vám přináší pohodlí celodenního ošetřování na jedno nabití. Protože je gutaperča tekutá při nižší teplotě, jsou násadce připravené k použití během několika sekund.




Odolný bezdrátový výkon

Bezdrátové násadce jsou odolné a otřesu vzdorné s pocitem lehkosti a pohodlí. Každý násadec je opatřen 360° aktivačním prstencem pro volnost pohybu. Kromě toho jsou pro větší bezpečnost pacienta lépe izolovány zahřívací jednotky.⁵

4. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus® Dual, data na vyžádání. 5. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus®, data na vyžádání.

*Kapacita baterií násadců Pack a Flow umožňuje jejich použití až při pěti ošetřeních denně na jedno nabití.

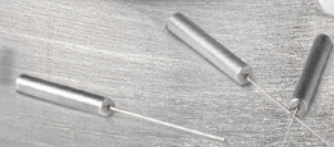

Gutta-Smart™ + gutaperča Conform Fit™

Objednací čísla

Bezdrátová obturační jednotka Gutta-Smart™



Gutta-Smart™ Kit obsahuje	Obj. č.
	B00GSIQ000KIT
1 násadec Flow	
1 násadec Pack	
1 základna	
2 blistry kartuší s gutaperčou	
3 horké pluggery (EHP)	
1 zahřívací jednotka	
1 nástroj na ohýbání kanyl	
1 napájecí adaptér + 4 univerzální zástrčky	
2 krytky pro čištění	

Kartuše s gutaperčou Gutta-Smart™ Conform Fit™



Popis	Balení	Obj. č.
Tloušťka 20G	10 ks	BNSGSIQA0020G
Tloušťka 23G	10 ks	BNSGSIQA0023G
Tloušťka 25G	10 ks	BNSGSIQA0025G

Gutta-Smart™ koncovka pro test vitality teplem (TRT)




Množství	Obj. č.
1 ks	B00GSIQ100000

Gutta-Smart™ horké pluggery (EHP)



Popis	Balení	Obj. č.
Malý (40/.025)	1 ks	B00GSIQ100SML
Střední (50/.05)	1 ks	B00GSIQ100MED
Velký (60/.06)	1 ks	B00GSIQ100LRG

Gutaperčové čepy Conform Fit™ pro ProTaper Gold®

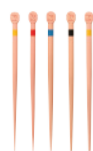

Barva	Velikost	Balení	Obj. č.
Žlutá	F1	60 ks	B00PGGPF000F1
Červená	F2	60 ks	B00PGGPF000F2
Modrá	F3	60 ks	B00PGGPF000F3
Sortiment	F2/F3	60 ks	B00PGGPF000F23
Sortiment	F4/F5	60 ks	B00PGGPF000F45

Gutaperčové čepy Conform Fit™ pro ProTaper Next®



Barva	Velikost	Balení	Obj. č.
Červená	X2	60 ks	B00PNGPF000X2
Modrá	X3	60 ks	B00PNGPF000X3
Sortiment	X2/X3	60 ks	B00PNGPF000X23
Sortiment	X4/X5	60 ks	B00PNGPF000X45

Gutaperčové čepy Conform Fit™ pro WaveOne® Gold



Barva	Velikost	Balení	Obj. č.
Žlutá	Malý	60 ks	B00WGGPF00SML
Červená	Základní	60 ks	B00WGGPF00PRI
Zelená	Střední	60 ks	B00WGGPF00MED
□ Bílá	Velký	60 ks	B00WGGPF00LRG
Sortiment	M/Z/S/V	60 ks	B00WGGPF00AST

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny obrázky vlastnictvím Dentsply Sirona, Inc.