



WE  
KNOW  
ENDO.

WaveOne® Gold

Surfujte kanálkem  
s jistotou



Dentsply  
Sirona  
Endodontics



# Nejmodernější technologie pro reciprokační systém

Jednoduchost práce s jedním kořenovým nástrojem WaveOne® je nyní ještě lepší v případě WaveOne® Gold. Tento kořenový nástroj je vyroben pokrokovou metalurgií a představuje další generaci od Dentsply Sirona.

- Zvyšuje bezpečnost pacienta a současně zkracuje dobu opracování\*\*
- Nástroj s vylepšeným designem
- Součást uceleného řešení, které zahrnuje produkty pro obturaci navržené tak, aby odpovídaly tvarům vytvořeným nástroji WaveOne® Gold
- Rodina WaveOne® Gold nyní obsahuje jeden nástroj pro vytvoření hladké cesty reciprokačním pohybem, což znamená jednoduchost od samého začátku




Optimalizovaný hrot

Variabilní kónus

Tepelně ošetřený technologií Gold

Kosodélníkový průřez

Reciprokační pohyb

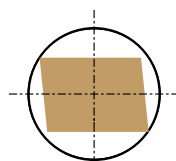

\*ve srovnání s WaveOne®

\*\*výsledky interních laboratorních testů

## Jednoduchost pro Vás, bezpečnost pro Vaše pacienty

### Zvyšuje bezpečnost pro pacienta

- Kořenový nástroj WaveOne® Gold Primary je především o 50 % odolnější vůči cyklické zátěži než WaveOne® Primary
- Minimalizovaný efekt „zašroubování“\* ve srovnání se standardními rotačními systémy


### Pokrývá širší\* spektrum kanálků

- Lepší pružnost kořenového nástroje díky technologii Gold
- Více velikostí (Small, Primary, Medium, Large)


### Zkracuje dobu potřebnou pro opracování

- Dostává řeznou efektivitu na vyšší úroveň
- Jeden kořenový nástroj pro jedno ošetření také přináší úsporu času potřebného pro opracování kanálku a irigaci


#### Odolnost vůči cyklické zátěži\*\*

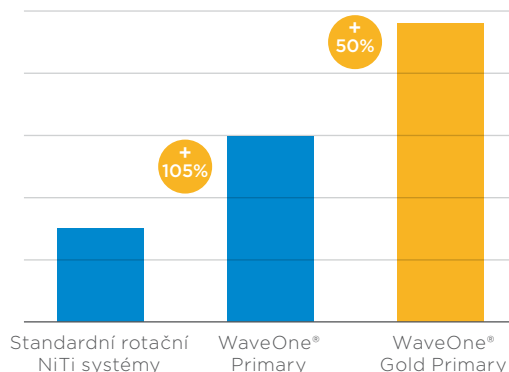

#### Flexibilita\*\*

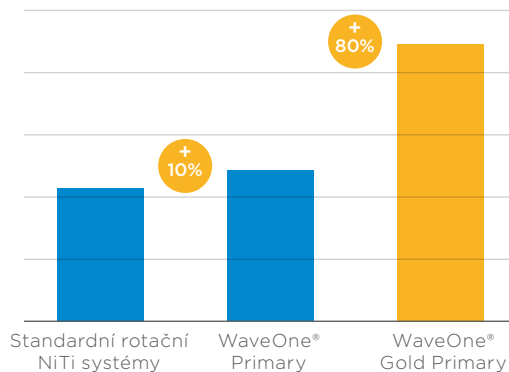

#### Pracovní doba opracování\*\*

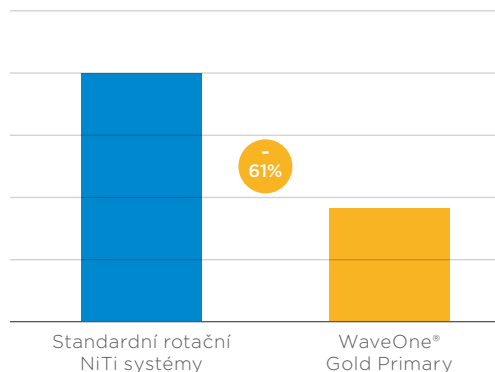

\*ve srovnání s WaveOne®

\*\*výsledky interních laboratorních testů



# Další generace výkonu

Dentsply Sirona spolupracovala na vývoji WaveOne® Gold s nejlepšími odborníky na endodoncii



*Slova designérského týmu - Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. W. Pertot, Dr. S. Kuttler*

## Opracování kanálků nikdy nebylo snazší

Od svého uvedení na trh v roce 2011 nastavil systém WaveOne® firmy Dentsply Sirona nový standard v opracování kořenových kanálků. Praktičtí zubní lékaři a endodontisté celého světa oceňují jednoduchost, kterou WaveOne® přináší do jejich snahy poskytnout pacientům kvalitní endodontické ošetření.

Pracovali jsme na novém a velmi zajímavém projektu WaveOne®, abychom vám přinesli WaveOne® Gold.

WaveOne® Gold přináší do ošetření kořenového kanálku metalurgicky vylepšenou techniku jednoho kořenového nástroje. Optimalizovali jsme průměry hrotu, kónusy a průřez tak, abychom vytvořili kořenový nástroj, který při preparaci kořenových kanálků skutečně zlepšuje bezpečnost, účinnost a pružnost. WaveOne® Gold dostává ošetření na jinou úroveň.

# Jedno ucelené řešení

Rodina produktů WaveOne® Gold poskytuje ucelené řešení napomáhající jistotě a předvídatelnosti tvaru.

## Endodontické motory

X-SMART PLUS a X-SMART IQ™ jsou předem naprogramovány pro jednoduché použití s WaveOne® Gold

## Hladká cesta (Glide Path)

WaveOne® Gold Glider optimalizuje vytvoření hladké cesty před opracováním pomocí WaveOne® Gold Primary\*\*

## Opracování

Kořenové nástroje WaveOne® Gold jsou k dostání ve čtyřech velikostech (S, P, M, L) a ve třech délkách (21, 25 a 31 mm)

## Obturace

Účelné obturační produkty WaveOne® Gold zahrnují papírové čepy, různě kónické gutaperčové čepy a obturátory Thermafil®

## Výplňové systémy Dentsply Sirona

Pro výplňová řešení, prosíme, navštivte naše webové stránky [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

## WaveOne® Gold Glider

# Vytvořte svoji hladkou cestu s jistotou


Tento nový nástroj pro vytvoření hladké cesty byl navržen ve spolupráci s týmem odborníků na endodoncii: Dr. E. Berrutti, Dr. G. Cantatore, Dr. A. Castellucci, Dr. S. Kuttler, Dr. W. Pertot, Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. J. West.

Jediný reciprokační nástroj pro vytvoření hladké cesty, který je součástí řešení WaveOne® Gold optimalizuje Vaši přípravu na opracování.


- Respektuje přirozený tvar kanálku
- Zvyšuje bezpečnost pacienta díky lepší pružnosti a odolnosti vůči cyklické zátěži
- Sterilní a jednorázový nástroj, který si zachová řeznou účinnost, snižuje riziko zalomení a zabraňuje křížové kontaminaci

WaveOne® Gold Glider se používá pouze při reciprokačním pohybu v kompatibilních motorech Dentsply Sirona. K dispozici jsou předem naprogramované endodontické motory.

Nižší tuhost v ohybu než PathFile, pro větší flexibilitu díky tepelnému ošetření technologií Gold\*\*

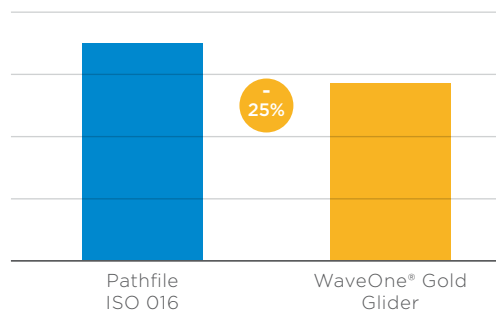

Lepší odolnost vůči cyklické zátěži\*\*

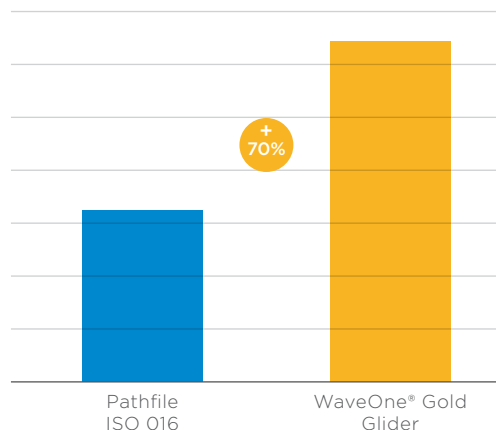

WaveOne® Gold Glider



015 2%

WaveOne® Gold



020 7% Velikost Small



025 7% Velikost Primary



035 6% Velikost Medium



045 5% Velikost Large

Barevné kódování podle ISO

Většinu\*\* kořenových kanálků je možné opracovat jediným kořenovým nástrojem WaveOne® Gold Primary

\*\*výsledky interních laboratorních testů



# Širší výběr odpovídajících produktů

Přidáním nástroje pro vytvoření hladké cesty Vám WaveOne® Gold poskytuje pohodlí celého spektra produktů navržených tak, aby fungovaly společně již od samého začátku.

## Originální rodina produktů WaveOne® Gold



## Rozšířená rodina produktů WaveOne® Gold pod naší novou značkou Dentsply Sirona




# Nový zlatý standard gutaperči představený pro WaveOne® Gold



## Naprostá přizpůsobivost

Různě kónické gutaperčové čepy jsou speciálně vytvarované tak, aby se přizpůsobily kanálku preparovanému pomocí WaveOne® Gold.

Prvotřídní apikální objem výplně z gutaperči\*\*

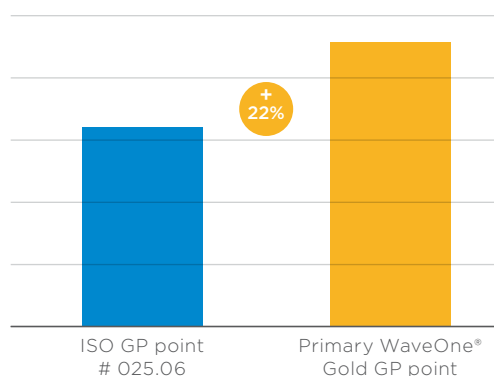

Jasně rozeznatelné: stejné barevné kódování,



\*\*internal laboratory testing results

# Papírové čepy a Thermafil® pro WaveOne® Gold



## Papírové čepy

- Papírové čepy jsou balené v samostatných sterilních obalech po 5 čepích
- Připravené k okamžitému použití, toto balení odpovídá průměrné spotřebě při ošetření jednoho kanálku




## Thermafil® pro WaveOne® Gold

Thermafil®, který máte rádi, byl optimalizován pro opracování pomocí WaveOne® Gold.

- Balení v blistru: Snadná manipulace
- Sériové číslo a datum použitelnosti na štítku každého obturátoru pro lepší kontrolu

jako u kořenových nástrojů.

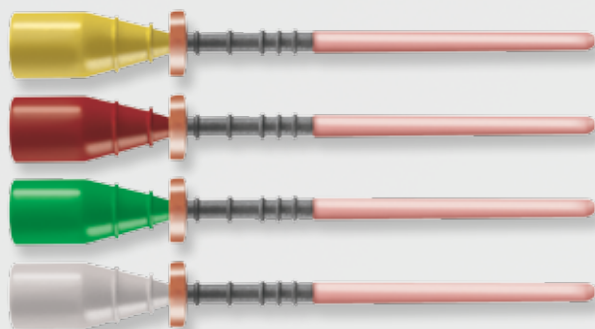



# Objednací čísla výrobků

## WaveOne® Gold Glider - reciprokační kořenové nástroje pro Glide Path



### 015.02 variabilní kónus

3x	21 mm	B ST WIGG 321 015
3x	25 mm	B ST WIGG 325 015
3x	31 mm	B ST WIGG 331 015
6x	21 mm	B ST WIGG 621 015
6x	25 mm	B ST WIGG 625 015
6x	31 mm	B ST WIGG 631 015

## WaveOne® Gold - reciprokační kořenové nástroje s variabilním kónusem



### Small - 020.07

3x	21 mm	A 0753 221 G0S 03
3x	25 mm	A 0753 225 G0S 03
3x	31 mm	A 0753 231 G0S 03
6x	21 mm	A 0756 221 G0S 03
6x	25 mm	A 0756 225 G0S 03
6x	31 mm	A 0756 231 G0S 03



### Primary - 025.07

3x	21 mm	A 0753 221 GOP 03
3x	25 mm	A 0753 225 GOP 03
3x	31 mm	A 0753 231 GOP 03
6x	21 mm	A 0756 221 GOP 03
6x	25 mm	A 0756 225 GOP 03
6x	31 mm	A 0756 231 GOP 03



### Medium - 035.06

3x	21 mm	A 0753 221 G0M 03
3x	25 mm	A 0753 225 G0M 03
3x	31 mm	A 0753 231 G0M 03
6x	21 mm	A 0756 221 G0M 03
6x	25 mm	A 0756 225 G0M 03
6x	31 mm	A 0756 231 G0M 03



### Large - 045.05

3x	21 mm	A 0753 221 G0L 03
3x	25 mm	A 0753 225 G0L 03
3x	31 mm	A 0753 231 G0L 03
6x	21 mm	A 0756 221 G0L 03
6x	25 mm	A 0756 225 G0L 03
6x	31 mm	A 0756 231 G0L 03



### Sortiment

#### Small/Primary/Medium/Large

21 mm	A 0754 221 G9A 03
25 mm	A 0754 225 G9A 03
31 mm	A 0754 231 G9A 03

## WaveOne® Gold papírové čepy



### Krabička 180x sterilní papírový čep

Small	A 175W 000 00S 03
Primary	A 175W 000 00P 03
Medium	A 175W 000 00M 03
Large	A 175W 000 00L 03

## WaveOne® Gold gutaperčové čepy



### Krabička 60x gutaperčový čep, různý kónus

Small	A 175X 000 00S 00
Primary	A 175X 000 00P 00
Medium	A 175X 000 00M 00
Large	A 175X 000 00L 00

## Thermafil® pro WaveOne® Gold



### Blistr 6x obturátor

Small	A 1750 B00 00S 00
Primary	A 1750 B00 00P 00
Medium	A 1750 B00 00M 00
Large	A 1750 B00 00L 00

### Krabička 30x obturátor (5 blistrů)

Small	A 1750 P00 00S 00
Primary	A 1750 P00 00P 00
Medium	A 1750 P00 00M 00
Large	A 1750 P00 00L 00

## Endodontické motory/sety

### X-SMART® IQ Starter Kit A10541

1x X-SMART® IQ motor s hlavičkou 6:1  
5x blistr WaveOne® Gold Primary 25 mm, 3 ks  
4x blistr WaveOne® Gold Assortment 25 mm, 4 ks  
1x blistr WaveOne® Gold Glider 25 mm, 3 ks

### X-SMART® PLUS Starter Kit A10358

1x X-SMART® PLUS motor s hlavičkou 6:1  
5x blistr WaveOne® Gold Primary 25 mm, 3 ks  
4x blistr WaveOne® Gold Assortment 25 mm, 4 ks  
1x blistr WaveOne® Gold Glider 25 mm, 3 ks

### Endodontické motory

X-SMART IQ™	A1054
X-SMART® PLUS	A1032



## Píčka THERMAPREP 2



230V (EU)	A 0176 230 002 00
230V (UK)	A 0176 230 002 33
115V	A 0176 115 002 00

