
Intego Ambidextrous

Plán ošetřování a čištění pro stomatologickou soupravu

Průběžně aktualizovaný seznam schválených prostředků pro ošetřování, čištění a dezinfekci si pod číslem REF 5970905 můžete stáhnout na internetu na stránkách firmy Dentsply Sirona: https://www.dentsplysirona.com/ifu

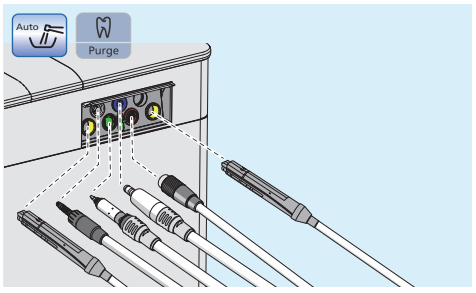


133 742Ráno

Automatický proplach vodních cest (funkce AutoPurge)

Zasuňte spojky do příslušných sanačních adaptérů:

- žlutý vlevo - Sprayvit E pracovní jednotky asistenta
- žlutý vpravo - Sprayvit E pracovní jednotky lékaře
- bílý - turbína
- zelený - motor BL E
- modrý - motor BL ISO E (rozhraní ISO)
- červený - ultrazvukový násadec SiroSonic L

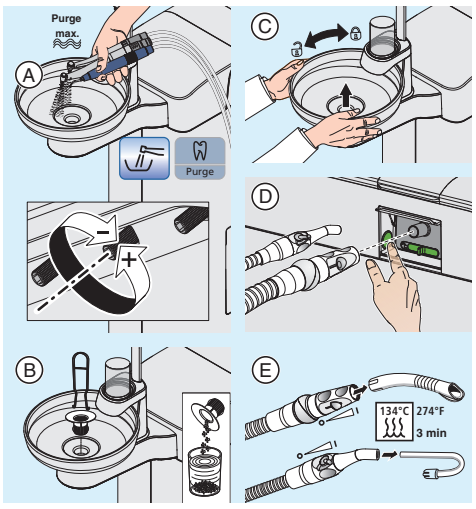

Po každém pacientovi

Čištění / dezinfikování vodních cest a odsávacího zařízení


POZOR! Používejte pouze prostředky pro ošetřování, čištění a dezinfekci schválené firmou Dentsply Sirona!

A) Propláchněte vodní cesty použitých nástrojů na pracovní jednotce lékaře (funkce Purge)
B) Vyčistěte sítko

POZOR! Zbytky amalgámu ekologicky zlikvidujte!

C) Vyčistěte / vydezinfikujte (odnímatelné) plivátko (speciální čisticí prostředek)
D) Vydezinfikujte odsávací násadce, poté proveďte čištění sacích hadic
E) Sterilizujte odsávací kanylu


Za účelem prevence refluxu používejte odsávací kanylu se vstupy pro přisávání falešného vzduchu.

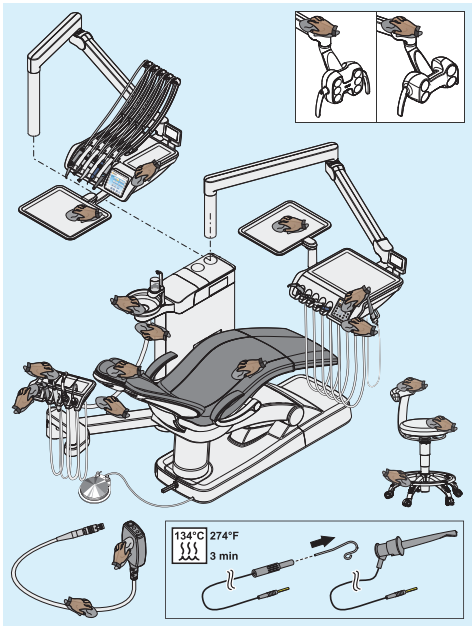

Čištění / dezinfikování povrchů

POZOR! Používejte pouze prostředky pro ošetřování, čištění a dezinfekci schválené firmou Dentsply Sirona!

- Vydezinfikujte povrchy a polstrování
- Vydezinfikujte ovládací panely
- Ošetřete, vydezinfikujte/sterilizujte stomatologické nástroje (viz návod k použití příslušných stomatologických nástrojů)
- Čištění, dezinfikování/sterilizace součástí apexlokátoru
- Vydezinfikujte držáky nástrojů
- Vydezinfikujte madla
- Vydezinfikujte tác
- Ošetřete a vyčistěte stomatologické svítidlo (viz návod k použití LEDlight Plus nebo LEDview Plus)

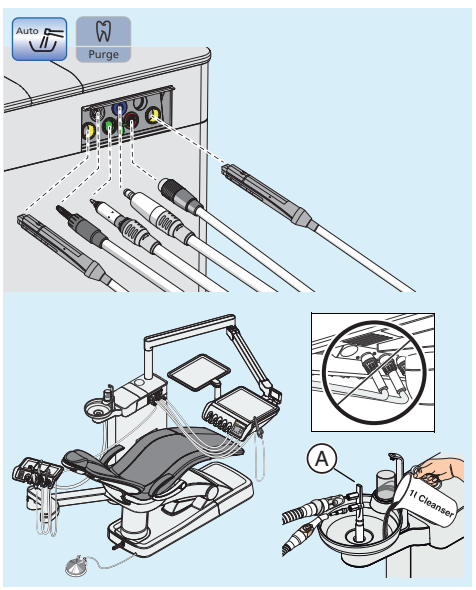

Večer

Automatický proplach vodních cest (funkce AutoPurge)


Zasuňte spojky do příslušných sanačních adaptérů:

- žlutý vlevo - Sprayvit E pracovní jednotky asistenta
- žlutý vpravo - Sprayvit E pracovní jednotky lékaře
- bílý - turbína
- zelený - motor BL E
- modrý - motor BL ISO E (rozhraní ISO)
- červený - ultrazvukový násadec SiroSonic L

Není-li k dispozici volitelné vybavení „Chemické čištění hadic“:

Vydezinfikujte sací hadice pomocí adaptéru sacích hadic plivátka (A)


- denně v poledne a
- na konci pracovního dne.

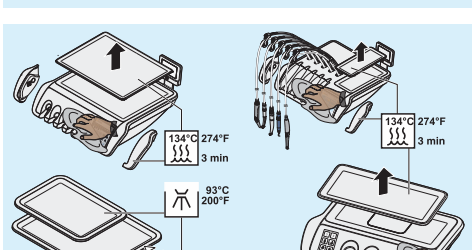

Sterilizace silikonových podložek / potahů madel

Tepelná dezinfekce tácu a držáku pohárku

Dezinfekce pracovní jednotky lékaře a asistenta

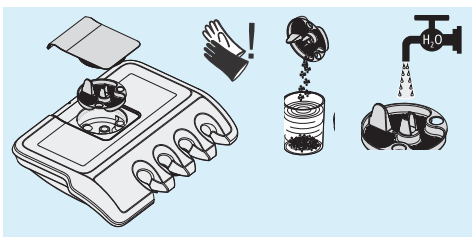


Vyprázdnění centrálního sacího sítka


Při vyprazdňování centrálního sacího sítka používejte ochranné rukavice!


Zbytky amalgámu shromažďujte v uzavřené nádobě s vodou.


POZOR! Zbytky amalgámu ekologicky zlikvidujte.


Vyprázdněné sací sítko vyčistěte pod tekoucí vodou.

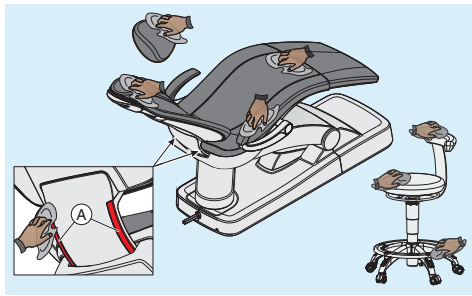


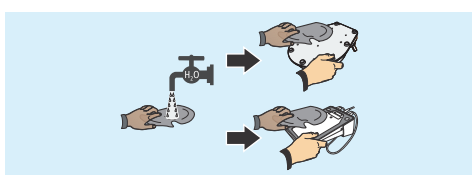


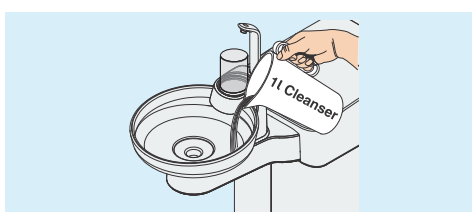


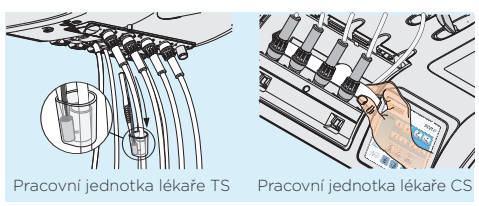


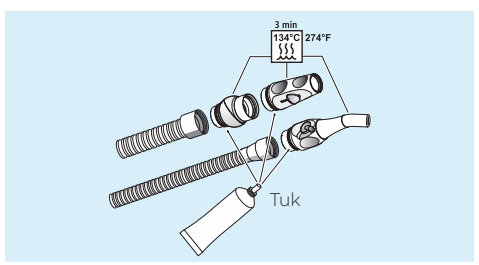


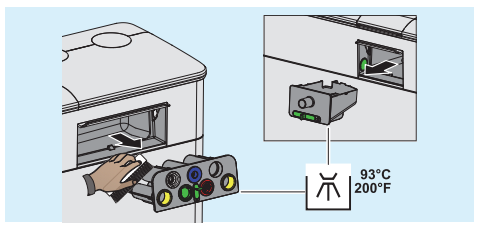

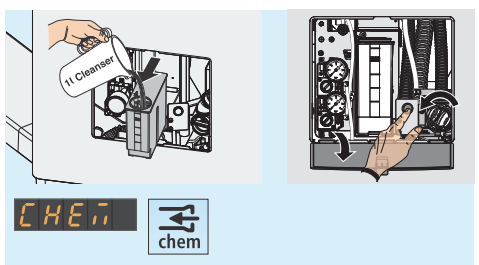

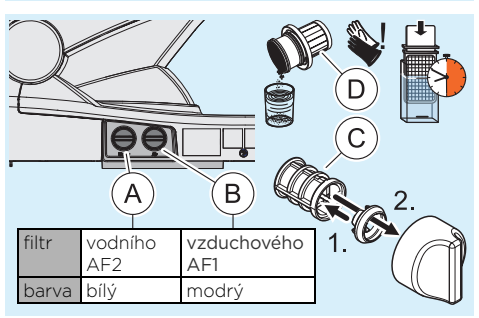

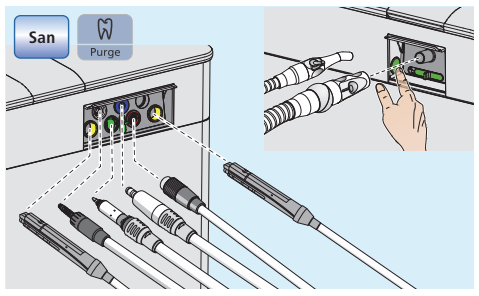

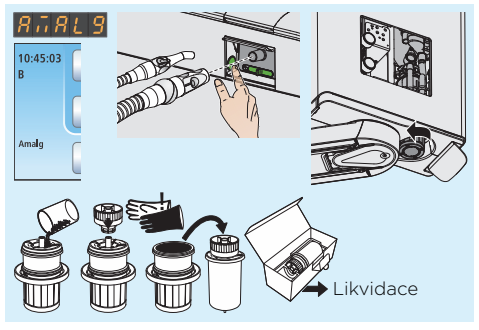

Týdně

Čištění a ošetření polstrování

POZOR! Používejte pouze prostředky pro čištění a ošetřování polstrování schválené firmou Dentsply Sirona!

Přesně dodržujte návod k použití prostředku pro čištění a ošetřování.

Zabraňte kontaktu prostředku FD360 s chromovanými povrchy.

Vyčistěte spodní část kluzné plochy (A) podpůrné lišty opěrky zad

Čištění nožního spínače

Spodní stranu nožního spínače očistěte (vodou) navlhčeným hadříkem.

Je-li k dispozici volitelné vybavení „Chemické čištění hadic“:

Vyčistěte odtokové cesty

Čisticí prostředky pro chemické čištění hadic a odsávacího zařízení jsou identické (viz REF 5970905).

Pracovní jednotka lékaře TS

Vyměňte vatovou roličku na hadici turbíny

Pracovní jednotka lékaře CS

Vyměňte olejovou jímku

Sterilizujte odsávací násadce

Promazání odsávacích násadců

Po provedení tepelné dezinfekce nebo sterilizace a v týdenních intervalech odpojte odsávací násadce a O-kroužky promažte tukem.

Tepelná dezinfekce vsuvek sanačních adaptérů a čištění sacích hadic

Měsíčně nebo podle potřeby

Doplnění zásobníku na čisticí prostředek

Na ovládacím panelu se zobrazí hlášení „chem“: Co nejdříve doplňte čisticí prostředek pro chemické čištění sacích hadic (volitelné vybavení).

Čištění filtrační vložky mokrého odsávání

Před vyjmutím filtru za účelem čištění stiskněte v poddialogu Start tlačítko „Odsátí zbytkové vody“.

Výměna vodního (A) a vzduchového (B) filtru (C)

Pozor Před výměnou filtrů se ujistěte, že je stomatologická jednotka vypnuté.

Vyprázdnění sedimentační nádoby (D) (volitelné vybavení)

Při vyprazdňování sedimentační nádoby používejte ochranné rukavice!

Mikrobiologická kontrola vody

- V pravidelných intervalech v závislosti na výsledcích a
- po odstávkách > 1 týden.

Sanace stomatologické soupravy

K redukci biologického povlaku uvnitř systémů stomatologické soupravy vedoucích čerstvou vodu

- žlutý vlevo - Sprayvit E pracovní jednotky asistenta
- žlutý vpravo - Sprayvit E pracovní jednotky lékaře
- bílý - turbína
- zelený - motor BL E
- modrý - motor BL ISO E (rozhraní ISO)
- červený - ultrazvukový násadec SiroSonic L

Po sanaci proveďte čištění sacích hadic.

Výměna rotoru separátoru amalgámu

POZOR! Rotor musí být v každém případě vyměněn nejpozději po 12 měsících!

1. Na ovládacím panelu se zobrazí hlášení „Amalg“. Proveďte dezinfekci.
2. Rotor separátoru amalgámu vyjímejte pouze při zapnuté soupravě.
3. Nasypte vyjmuté zbytky amalgámu, rotor uzavřete.
4. Vyjměte rotor ze spodní části a ekologicky jej zlikvidujte.


Podrobnosti najdete v návodu k použití.
V otázkách hygieny a dezinfekce je nutno se řídit národními požadavky a doporučeními (např. RKI, ADA, CDC aj.).

Č. tisku D3543.104.03.07.16 Objednací č. 65 95 156 10.2022 Č. změny 133 742

Technické změny a omyly vyhrazeny.


Intego Ambidextrous Konverze

Příprava v případě volitelných variant vybavení

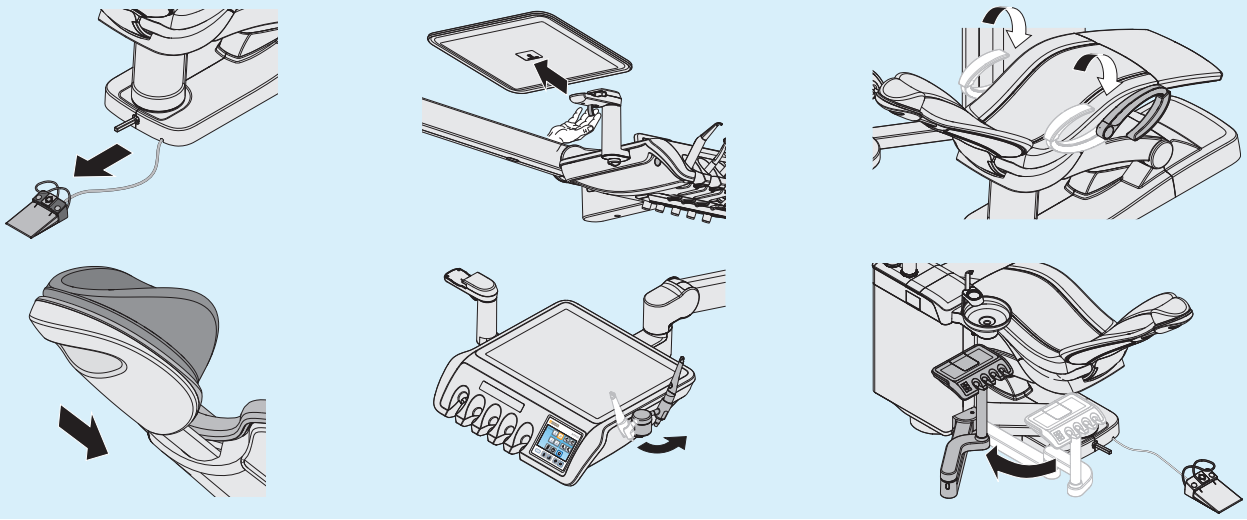


Konverze stomatologické jednotky

1. Umístěte základní jednotku

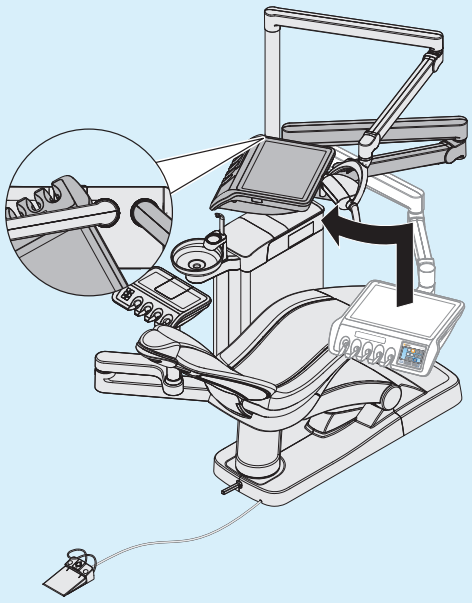


2. Umístěte světlo

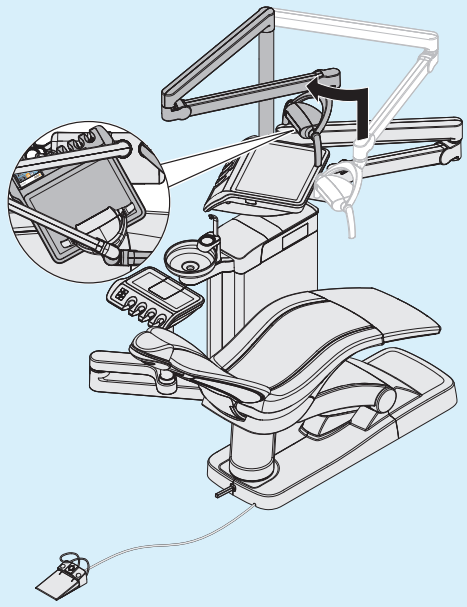


3. Zahajte proces konverze


- Stiskněte pedál a jednotku vody přemístěte dopředu
- Zazní akustický signál
- Stomatologické křeslo se automaticky přesune do polohy pro konverzi

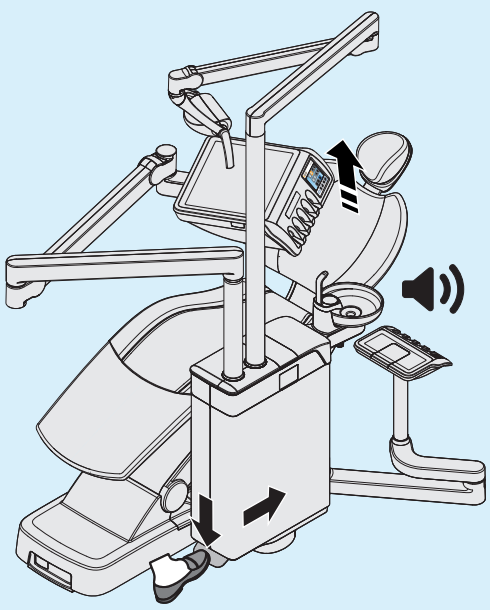

4. Proveďte proces konverze

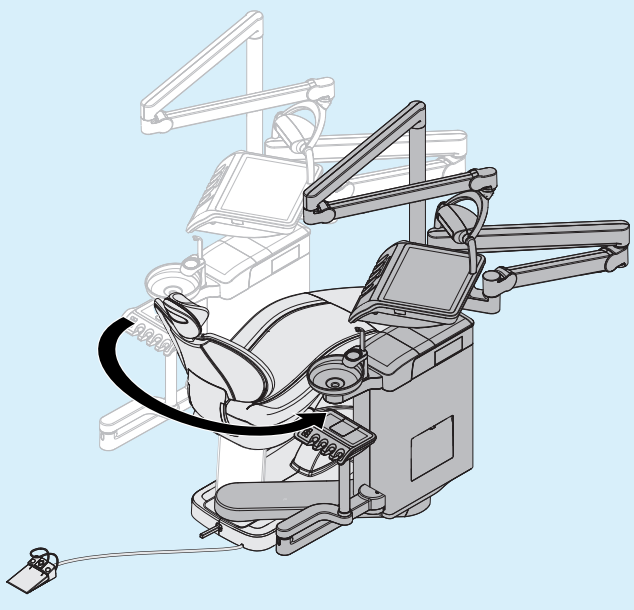

Seřiďte ošetřovací polohu

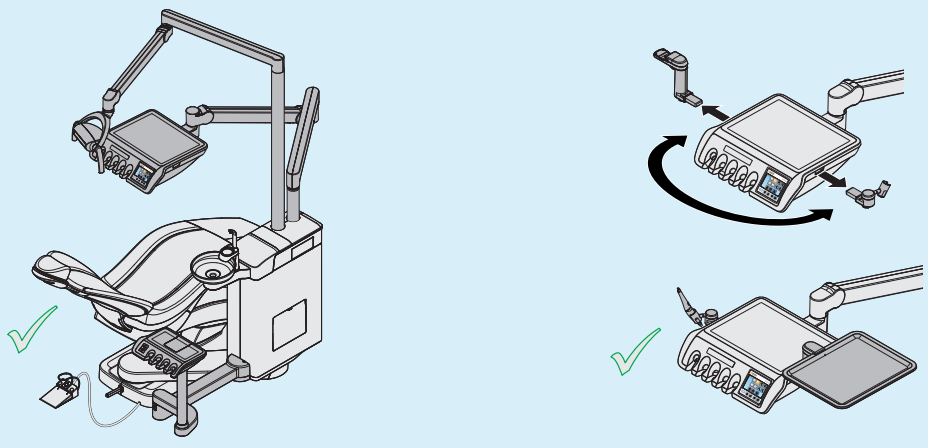

Podrobnosti najdete v návodu k použití.

Č. tisku D3543.104.03.07.16 Objednací č. 65 95 156 10.2022 Č. změny 133 742

Technické změny a omyly vyhrazeny.